


ウルトラフレックスコンポーネント 【肘・膝・足関節用継手】

肘・膝・足関節用

ROMの改善に関節拘縮の 矯正リハビリに

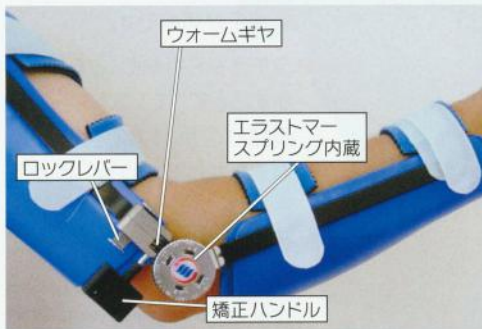

● 適応症例

- 手術後の関節拘縮のリハビリに
- 痙縮のコントロールに脳血管障害、脳損傷後、脳性マヒ
- 可動域の保持増大

ウルトラフレックス コンポーネントとは

● 特長



- 筋細胞の回復、可動域の拡大、痙縮の治療を目的に開発されました。
- 従来の継手と違い、定量的に微妙なトルクの強弱を調整することができます。
- 組織を伸ばすことのできるぎりぎりの範囲まで、精密な調整ができます。

● メカニズム

- ウォームギヤによる無段階調整
- エラストマースプリングによる持続的矯正
- どの角度でも固定できるスライドロック

● 自在な組み合わせ

- 肘・手首・膝・足首
- 一つのコンポーネントで、伸展力屈曲力やポジショニングなどダイナミックで自在な使用ができます。

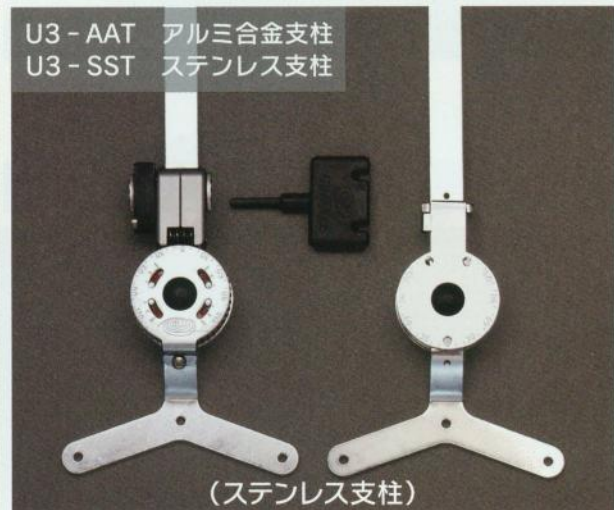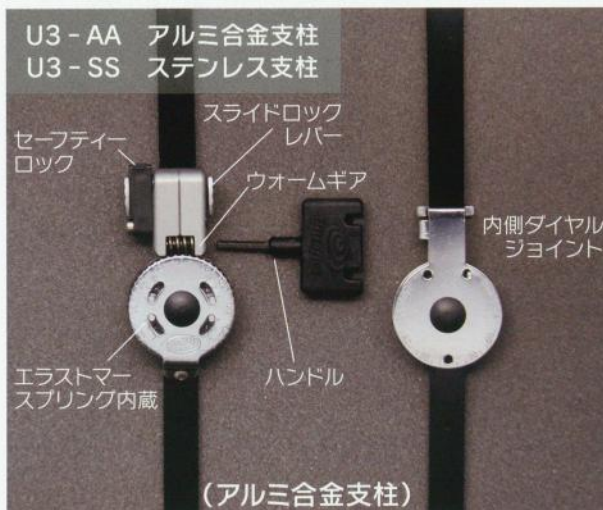

ウルトラフレックス UⅢ継手 製品仕様				
膝関節・肘関節用 (左右兼用)			足関節用 (左右兼用)	
品名	膝関節・肘関節用 (左右兼用)		品名	足関節用 (左右兼用)
品番	U3-AA	U3-SS	品番	U3-AAT
材質	アルミ合金支柱	ステンレス支柱	材質	アルミ合金支柱
サイズ	Φ38・t15	Φ38・t15	サイズ	Φ38・t15
支柱	12.7×3.2×254mm	12.7×3.2×254mm	支柱	12.7×3.2×254mm
トルク	7.5Nm	10.2Nm	トルク	7.5Nm
重量	1組/250g	1組/460g	重量	1組/210g
				1組/380g

(米国、日本 PATENT)

 アドバンフィット株式会社

〒866-0815 熊本県八代市長田町3300番地
TEL (0965) 33-3992
FAX (0965) 32-1492